



# NOVAPED exclusive

by schein



Handmade in Germany  
[www.schein-exclusive.de](http://www.schein-exclusive.de)



*individuell · elegant · exklusiv*

# Millionen Design-Kombinationen – Individualität für Ihre Füße

Den eigenen individuellen Abdruck seiner Füße im Sand kennt jeder. Das Gefühl von Barfußlaufen auf einem weichen Untergrund ruft bei vielen Menschen Entspannung und Wohlbefinden hervor.

Dieses Empfinden spiegeln auch die **NovaPED exclusive** Sandalen wider. Anders als gewöhnliche Sandalen bieten die **NovaPED exclusive**, auf Grund ihrer anatomischen Fußbettung, dem Fuß genügend Halt und Unterstützung, gleichzeitig schaffen sie Komfort und Bequemlichkeit.

## Individuell, elegant und exklusiv:

Ein maßgefertigtes Gesamtkonzept, das durch ein qualitativ hochwertiges Produkt überzeugt und den individuellen Geschmackswünschen der Kunden entspricht.

Individuelle Designs, wie edle Swarovski® Steine, Futter aus Lammfell oder einer Lasergravur im Deckenbezug sind nur einige von vielen besonderen Extras.

**NovaPED exclusive** sind Maßsandalen für Menschen, die nicht auf Gehkomfort verzichten möchten, das Exklusive lieben und ihren Füßen etwas Gutes tun wollen.



Irgendwo auf der Welt ist immer Sommer

# Welche Bestellmöglichkeiten stehen zur Auswahl

## Mögliche Bestellvorgänge

Es gibt drei verschiedene Wege, um NovaPED exclusive Sandalen zu bestellen: Schablone, Measure oder Kit. Welchen Sie nutzen, können Sie frei entscheiden.

Die Wahl richtet sich zum einen danach, ob Sie selbst das Fußbett konstruieren möchten oder Sie dies in unsere Hände geben möchten. Zum anderen hängt es auch davon ab, ob Sie einen Kunden mit physiologischen Füßen oder einem sehr unterschiedlichen Fußpaar versorgen müssen.

Bitte lesen Sie sich daher die folgenden Seiten in aller Ruhe durch und verschaffen Sie sich einen Überblick.

Des Weiteren ist es ebenfalls möglich, lediglich die Materialien bei uns einzukaufen, um das Fußbett anschließend selbst zu fräsen. Da dies je nach Fräsmaschine differiert, sprechen Sie uns dafür bitte an, damit wir Sie individuell beraten können.

### Schablone Standard Wellness-Fußbett



- ▶ Designkonfiguration für X-oder Y-Sandale erstellen
- ▶ Kein Fußabdruck notwendig
- ▶ Standardisiertes Fußbett - Bestellung mittels Bestellformular
- ▶ Erhältlich als **Bausatz mit Anleitung**
- ▶ oder als **Fertigmodell** mit Standard Riemchen-Volumen



## Measure

### Individuelles Wellness-Fußbett



- ▶ Designkonfiguration für X-oder Y-Sandale erstellen
- ▶ Fußabdruck notwendig
- ▶ **Wir konstruieren für Sie** das individuelle Fußbett - Bestellung mittels Bestellformular
- ▶ oder **Sie konstruieren selbst** das individuelle Fußbett - Bestellung und Konstruktion mittels SCHEINWORKS construction
- ▶ Sie erhalten einen **Bausatz mit Anleitung**
- ▶ oder Sie erhalten ein **Fertigmodell** (Ballen- und Vorspannmaß notwendig)

## Kit

### Orthopädisches Fußbett



- ▶ Designkonfiguration für X-oder Y-Sandale erstellen
- ▶ Fußabdruck notwendig
- ▶ Sie konstruieren selbst das individuelle Fußbett - Bestellung und Konstruktion mittels SCHEINWORKS construction
- ▶ Sie erhalten einen **Bausatz mit Anleitung**



# Tragekomfort und Design auf höchstem Niveau

## Aufbau der NovaPED exclusive Sandalen

Wenn wir Ihre Bestellung erhalten haben, beginnt unsere Produktion:

Mittels modernster CNC-Frästechnologie, gepaart mit liebevoller Handarbeit, hochwertigen Ledern und Materialien entsteht ein maßgefertigtes, erstklassiges Produkt – Made in Germany.

Die besondere Anatomie des Fußbettes stützt nicht nur das Längsgewölbe, sie bettet auch die Ferse entsprechend, damit das typische Übertreten verhindert wird.



### Deckenbezug

kann aus Alcantara, Teddyfell oder Fell gewählt werden. Bei vielen Deckenbezügen können Sie sich beispielsweise Ihre Initialen oder Namen eingravieren lassen. Damit runden Sie die persönliche Note Ihres Modells ab.

### Lauffläche

das Fußbett bietet extrem hohen Gehkomfort und ist wohltuend für Füße und Beine und steht damit für ein ermüdungsfreies Gehen.

### Laufsohle

bietet dank des rutschhemmenden Profils optimalen Grip.

### X- oder Y-Riemchen

können in unterschiedlichen Breiten, sowie Materialkombinationen und zusätzlichen Extras im Konfigurator individuell zusammengestellt werden.

### Zehensteg

angepasst auf Ihren Fußabdruck für einen optimalen und angenehmen Halt zwischen den Zehen.

### Zwischenlage

fixiert die Enden der Schäfte und sorgt gleichzeitig für eine größere Festigkeit und höhere Dämpfung beim Gehen. Darüber hinaus sorgt sie immer für einen Farbakzent.

# Bestellvorgang Schablone

## Schablone Standard Wellness-Fußbett



Bestellbar ohne digitalen Fußscan oder Trittschaum-Abdruck - nur per Schablone.

### Was wird produziert?

Ein, aus unserer langjährigen Erfahrung heraus, standardisiertes Wellness-Fußbett, das wahlweise mit schmalem oder breitem Umriss geliefert werden kann.

### Was ist möglich?

- Größe, Umriss und Riemchenart (X oder Y) können frei gewählt werden
- Anatomie des Fußbetts und Volumen des Riemchens sind standardisiert und können nicht bestimmt werden
- Bestellbar als **fertig montiertes Modell** (festgelegtes einheitliches Riemchen-Volumen)
- oder als **Bausatz** (Riemchen-Volumen individuell anpassbar)

### Wie funktioniert es?

Für die Bestimmung des Umrisses nutzen Sie die Schablonensätze, passend zur X- und Y-Sandale, in schmal und breit.

### Zur Bestellung benötigen wir von Ihnen:

1. Die Design-Konfiguration des Kunden
2. Das Bestellformular in das Sie den gewünschten Umriss und die Größe eintragen.  
Zum Download auf [www.schein-exclusive.de](http://www.schein-exclusive.de)

### Bestellung per Bestellformular - Standardisiertes Fußbett

Bei einer Bestellung per Schablone brauchen wir keine Maße von Ihnen. Hier montieren wir das Riemchen nach einem von uns standardisierten Volumen.

### Schablonensätze:



Artikel-Nr. 96 9711-000  
Schmaler Satz  
bestehend aus je 1 Stück, Gr. 35 – 43



Artikel-Nr. 96 9712-000  
Breiter Satz  
bestehend aus je 1 Stück, Gr. 38 – 48



# Bestellvorgang Measure

## Measure

### Individuelles Wellness-Fußbett




Bestellbar über unser CAD System SCHEINWORKS construction oder auch über unser Bestellformular mit Trittschaum, Scan, Blaubdruck oder Druckmessung.

#### Was wird produziert?

Ein individuelles Wellness Fußbett mit moderat anpassbaren Elementen für einen gesunden/normalen Fuß.

#### Was ist möglich?

- Konstruktion eines individuellen bequemen Wellness-Fußbetts
- Moderat anpassbare Konstruktionselemente im Konstruktionsprogramm für einen normalen/gesunden Fuß
- Bestellbar als **Bausatz** (Riemchen-Volumen individuell anpassbar): Für eine schnelle und einfache Verarbeitung schicken wir Ihnen passend zur Bestellung die Bausatzanleitung für unsere X- oder Y-Sandale mit
- oder als **Fertigmodell**, das in drei Weiten per Maßtabelle im Konstruktionsbereich (proportional zur Fußgröße) angeboten wird

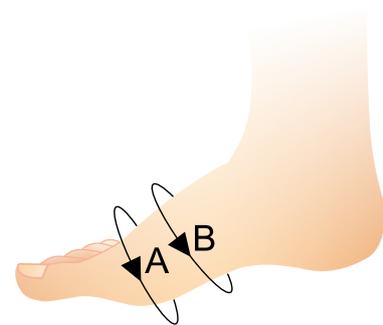

Ballenmaß (A) und Vorspannmaß (B)



# Bestellvorgang Measure

## Wie funktioniert es?

Sie haben die Möglichkeit das Fußbett selbst zu konstruieren (SCHEINWORKS construction - Zugang siehe Seite 11).

### Zur Bestellung benötigen Sie:

1. Trittschaum oder Scan als JPG- oder PNG-Datei und die DPI-Auflösung des Scanners
2. Designkonfiguration des Kunden
3. Maße Ihres Kunden
4. Wählen Sie zwischen einem Bausatz mit Anleitung oder einem Fertigmodell aus

## Wie funktioniert es?

Sie können alternativ das Fußbett auch von uns konstruieren lassen (Aufpreis).

### Zur Bestellung benötigen wir von Ihnen:

1. Trittschaum oder Scan als JPG- oder PNG-Datei und die DPI-Auflösung des Scanners
2. Designkonfiguration des Kunden
3. Bestellformular mit Maßangaben zum Download auf [www.schein-exclusive.de](http://www.schein-exclusive.de)
4. Wählen Sie zwischen einem Bausatz mit Anleitung oder einem Fertigmodell aus

### Bestellung per SCHEINWORKS construction - Sie konstruieren selbst

Wenn die Konstruktion und Montage des Riemchens durch Sie vor Ort erfolgt, messen Sie bitte die Füße und wählen Sie anschließend ein Volumen im Bestellvorgang in SCHEINWORKS construction aus.

#### Schritt 1: Maße nehmen

Insgesamt sind an jedem Fuß zwei Umfangsmaße in "mm" zu nehmen. Das Ballenmaß (A) wird am belasteten Fuß um die stärkste Stelle von Mittelfußknochen 1 zu 5 gemessen. Das Vorspannmaß (B) wird am belasteten Fuß 25 bis 30 mm hinter dem Ballenmaß bestimmt.

#### Schritt 2: Ermittlung des Mittelwertes

Für die weitere Berechnung sind die Maße des voluminöseren Fußes zu wählen. Bei abweichenden Werten von mehr als 10 mm zwischen linken und rechten Fuß wird ein Bausatz empfohlen. Die Leistenweite ist wie folgt zu berechnen:  
(Ballenmaß + Vorspannmaß) : 2 = Mittelwert

#### Schritt 3: Auswahl der Weite

Der errechnete Mittelwert (MW) dient zur Auswahl zwischen den Weiten S, M und W. Sie finden die Auswahl in SCHEINWORKS construction auf der letzten Seite, bevor die Bestellung abgeschickt wird.

Es ist immer eine Weite zu wählen, die größer dem errechneten Wert MW ist. Ist der errechnete Mittelwert größer als die Leistenweite W, empfehlen wir Ihnen einen Bausatz für die optimale Passform zu bestellen.

### Bestellung per Bestellformular - Konstruktion durch Schein

Wenn die Konstruktion und Montage des Riemchens durch uns erfolgen soll, tragen Sie bitte die Fußmaße in unser Bestellformular ein. Das Bestellformular finden Sie auf [www.schein-exclusive.de](http://www.schein-exclusive.de) zum Download.

#### Schritt 1: Maße nehmen

Insgesamt sind an jedem Fuß zwei Umfangsmaße in "mm" zu nehmen. Das Ballenmaß (A) wird am belasteten Fuß um die stärkste Stelle von Mittelfußknochen 1 zu 5 gemessen. Das Vorspannmaß (B) wird am belasteten Fuß 25 bis 30 mm hinter dem Ballenmaß bestimmt.

#### Beispiel: Bestellung mit Trittschaum

Der Trittschaumabdruck ist barfuß unter voller Belastung durchzuführen. Dabei sollte der Kunde senkrecht in den Trittschaum treten.

Markieren Sie mit einem Stift die Position zwischen dem ersten und zweiten Zeh für den Zehensteg.



# Bestellvorgang Kit

## Kit

## Orthopädisches Fußbett



Bestellbar über unser CAD System SCHEINWORKS construction.

### Was wird produziert?

Ein Fußbett mit individuell anpassbaren Elementen, das für leichte orthopädische Versorgungen geeignet ist.

### Was ist möglich?

- Konstruktion eines individuellen Fußbetts - nur von Ihnen selbst
- Größere Auswahl an Konstruktionselementen und deren Dimensionierung
- **Nur als Bausatz erhältlich:** Für eine schnelle und einfache Verarbeitung schicken wir Ihnen passend zur Bestellung die Bausatzanleitung für unsere X- oder Y-Sandale mit

### Wie funktioniert es?

Hier können nur Sie selbst konstruieren. Wenn Sie selbst konstruieren benötigen Sie einen Zugang zu unserer kostenlosen Software SCHEINWORKS construction.

### Zur Bestellung benötigen Sie:

1. Trittschaum oder Scan als JPG- oder PNG-Datei und die DPI-Auflösung des Scanners
2. Designkonfiguration des Kunden

### Bestellung per SCHEINWORKS construction - Individuelles Fußbett

Bei einer Bestellung per SCHEINWORKS construction benötigen wir keine Maße von Ihnen. Sie erhalten, entsprechend Ihrer Bestellung, einen Bausatz mit Anleitung.

Bausatz Y-Sandale



Bausatz X-Sandale



## Konstruktionsprogramm SCHEINWORKS construction

### Wie kann ich mit dem kostenlosen Programm SCHEINWORKS construction arbeiten?

Dies ist ganz einfach. Gehen Sie auf die Website unseres Programms [construction.scheinworks.de](http://construction.scheinworks.de) und registrieren Sie sich. Wir prüfen Ihre Daten und schalten Ihren Zugang frei. Danach können Sie das System bequem und kostenlos für Ihre Bestellungen nutzen.

### Funktioniert SCHEINWORKS construction auch mit „fremden“ Scansystemen?

JPG und PNG Daten von anderen Scan- und Messsystemen können auch in unser Konstruktionsprogramm SCHEINWORKS construction eingepflegt und als Grundlage für Ihre Konstruktion genutzt werden. Wichtig ist, die entsprechende Bildauflösung (dpi) im System einzutragen.

### Wie kann ich das Programm am besten kennenlernen oder mich darin schulen lassen?

#### Per Seminar

Wir bieten Workshops bei uns in Remscheid an. Bei einer begrenzten Anzahl von maximal zwölf Teilnehmern ist eine intensive Schulung möglich. Alle aktuellen Termine finden Sie immer auf [www.schein.de/seminare](http://www.schein.de/seminare)

#### Über unseren Außendienst

Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter kann Sie bei Fragen zu unserem Programm vor Ort unterstützen.

#### Über unseren Support

Darüber hinaus können Sie rund um SCHEINWORKS construction oder **NovaPED exclusive** unseren Support ansprechen. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer: +49 2191 910-193.

#### Über unser Handbuch

Wenn Sie sich bei SCHEINWORKS construction registriert haben, können Sie sich das Handbuch herunterladen, das Sie bei den Konstruktionsschritten unterstützt und das Programm Schritt für Schritt erklärt.



# NovaPED exclusive Konfigurator

## Wie sehen NovaPED exclusive Sandalen aus?

Wenn man das wüsste? Jeder **NovaPED exclusive** Kunde ist gleichzeitig Genießer und Designer in einem.

Im Internet kann jeder unter [www.schein-exclusive.de](http://www.schein-exclusive.de) auf unseren Konfigurator zugreifen. Dort stellt sich Ihr Kunde sein Paar **NovaPED exclusive** Sandalen nach eigenen Wünschen und persönlichem Geschmack zusammen.

Durch die enormen Kombinationsmöglichkeiten entstehen immer wieder neue Zusammensetzungen. Jeder Kunde erhält daher ein Unikat, das ganz auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist.



Konfigurationsbeispiel Y-Sandale



Konfigurationsbeispiel X-Sandale

## Welche Riemchenarten gibt es?

Sie können Ihre Sandale im Konfigurator mit einem X- oder einem Y-Riemchen gestalten. Bei beiden Arten, X und Y, können Sie zwischen einem schmalen und einem breiten Riemchen wählen.



## Informationen

### Wie werde ich NovaPED exclusive Partner?

Damit Sie als Händler unserer NovaPED exclusive Sandalen auf unserer Homepage eingetragen werden, füllen Sie bitte das Formular auf [www.schein-exclusive.de](http://www.schein-exclusive.de) aus.

Nachdem wir Ihre Daten geprüft haben, erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail, dass wir Ihren Eintrag freigeschaltet haben. Über die Eingabe der Postleitzahl können Ihre Kunden Sie schnell finden.



Partner werden auf [www.schein-exclusive.de](http://www.schein-exclusive.de)

### Was kostet mich ein Paar NovaPED exclusive Sandalen im Einkauf?

Auf Grund der vielfältigen Möglichkeiten, die unser Konfigurator bietet, kann das Grundmodell mit vielen Extras kombiniert werden.

Bitte fordern Sie unsere aktuelle Preisliste an, diese enthält den Einkaufspreis für das Grundmodell als auch für alle möglichen Extras.



### Wie bleibe ich up to date?

Um immer sofort über Neuheiten informiert zu werden, tragen Sie sich einfach auf [www.schein-exclusive.de](http://www.schein-exclusive.de) für unseren Newsletter ein.

### Kann ich auch nur die Riemchen einkaufen?


Ja, Sie können beide Riemchenarten auch paarweise ohne das Fußbett bestellen. Die Preise dazu finden Sie ebenfalls in unserer Preisliste.



# Werbung

## Unsere Werbemittel

Mit unseren Werbemitteln zieht der Sommer auch bei Ihnen ins Geschäft ein. Am besten rufen Sie uns an, wir schicken Ihnen dann eine Übersicht von allen Werbemitteln mit dem dazugehörigen Bestellformular zu.

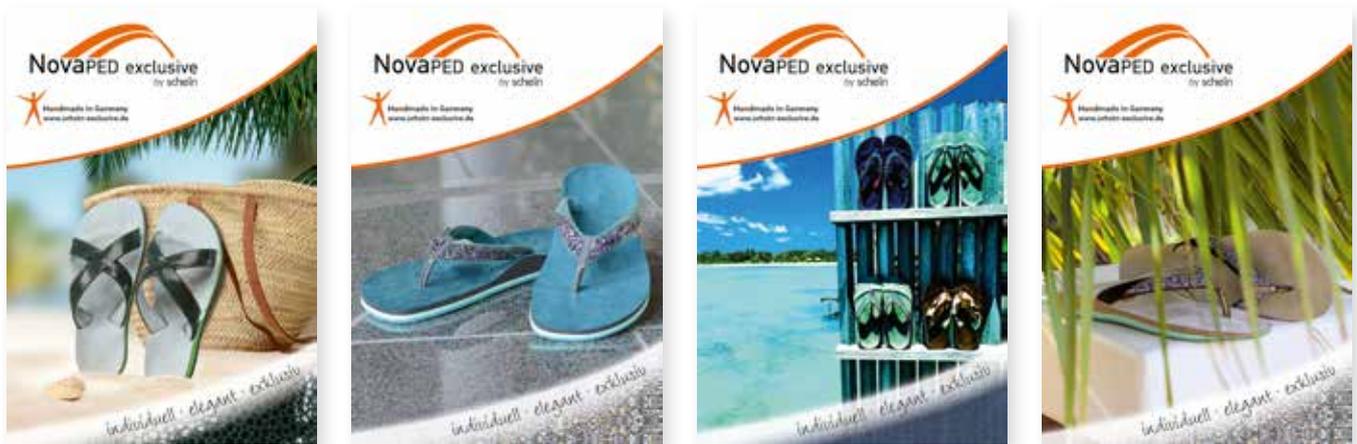

Poster



RollUp

# Werbung



Aufsteller



Flyer



Maßband



099990-530

Schein Orthopädie Service KG  
Hildegardstr. 5  
42897 Remscheid  
Germany  
Tel. +49 2191 910-200  
Fax +49 2191 910-100  
remscheid@schein.de  
www.schein-exclusive.de



— Germany since 1879 —